

ventura

de Siliconas
Laboratorio

*reproduciendo
el detalle*




ventura **gingival** *rigid*

Está especialmente indicada para prótesis sobre implantes simulando el tejido gingival que determina la forma de los contornos cervicales y el perfil de emergencia de la prótesis.



La consistencia estable y la adecuada dureza de **ventura gingival rigid** garantizan una posición estable de los implantes y evitan tensiones sobre el modelo.

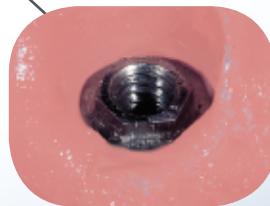



Tiempo de trabajo

Tiempo de fraguado

Shore- A

Ventura gingival rigid

1'

5'

75



Ventajas :

- ▶ El tipo de dureza es el ideal para el recorte y fresado de los bordes de la silicona.
- ▶ Gracias a su destacada estabilidad dimensional, mantiene su precisión durante días.
- ▶ Posee un óptimo modulo elástico, lo que posibilita quitar y posicionar de nuevo la máscara de **ventura gingival rigid** sobre el modelo.

Presentación
Ref: 3270

ventura gingival rigid 2 x50 ml.
ventura separator 10 ml.
6 mixing tips.
6 intra oral tips.

ventura **gingival** *elastic*

Está indicado para la reproducción de encías en modelos de prótesis fija.



Tiempo
de
trabajo

Tiempo
de
fraguado

Shore- A

Ventura
gingival
elastic

1'



5'

47



Ventajas :

- ▶ Resultados estéticos gracias al color gingival natural y su translucidez.
- ▶ Gracias a su destacada estabilidad dimensional, mantiene su precisión durante días.
- ▶ Posee una óptima memoria elástica, por lo que es posible quitar y posicionar de nuevo la máscara de **ventura gingival elastic** sobre el modelo.

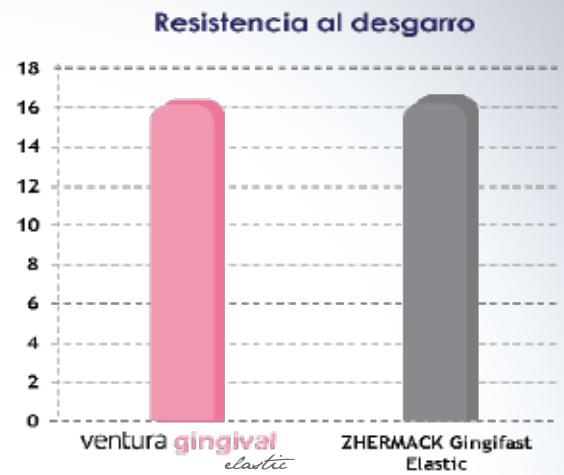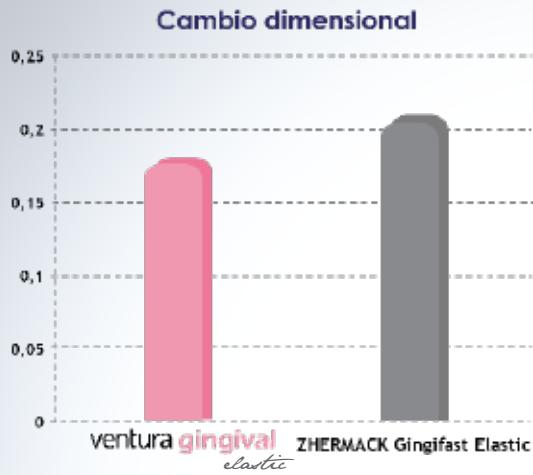

Presentación

Ref: 3271

ventura gingival elastic 2 x50 ml.

ventura separator 10 ml.

6 mixing tips.

6 intra oral tips.

ventura separator

Se aplica a la superficie de contacto entre cualquier tipo de siliconas para evitar la adhesión entre ellas. Se utiliza directamente tanto sobre impresiones previamente secadas como sobre matrices.

Es ideal para usar en combinación con **ventura gingival**. Puede aplicarse a todos los materiales de impresión, tanto de adición como de condensación.



Presentación

Ref: 3272

ventura separator 10 ml.

ventura **crystalsil** *fast set*

Ventura crystalsil está indicado para la realización de matrices de silicona transparentes.

Ventura crystalsil ayuda a la fotopolimerización de composites y/o resinas ya que su uso crea una atmósfera libre de oxígeno y una superficie más compacta sin capa de dispersión.



Tiempo
de
trabajo

1'

Tiempo
en cavidad
oral

2'

Dureza
shore A

70

Color

Transparente

Ventajas :

- ▶ Aúna un tiempo total de fraguado más corto con un tiempo de trabajo adecuado.
- ▶ Fácil y rápida aplicación.
- ▶ Gracias a su recuperación elástica, se puede conservar la máscara para usos posteriores.
- ▶ Excepcional estabilidad dimensional.

Presentación
Ref: 3275

ventura crystalsil 2 x 50 ml.
6 mixing tips green.

ventura top 85 *lab*

Ventura top 85 lab es una silicona de condensación realizada con una fórmula que mejora los tiempos de mezcla, la fluidez inicial y la plasticidad. Está especialmente indicada para llaves o frentes en los siguiente trabajos:

- Carga de resina en prótesis metálicas.
- Provisionales de resina.
- Reproducción de encías.
- Aislamiento de las prótesis dentales removibles para un desmenuado más limpio.



Ventajas :

- ▶ Dureza final ideal.
- ▶ Gran resistencia elástica del 99%.
- ▶ Resistencia a temperaturas de hasta 140 °C.
- ▶ Excelente reproducción de los detalles.
- ▶ Con una memoria elástica del 99%.



Presentación

Ref:1300

ventura top 85 lab 5 Kg + ventura catalyst gel 2 x 60 ml.

Ref:0483

ventura catalyst gel 60 ml.

	Ventura top 85 + Ventura top catalyst
Tiempo de mezcla	30"
Tiempo de trabajo	2'
Tiempo de fraguado	6'
Dureza Shore A	80 - 85
Color top 85	Gris brillante
Color catalyst	Rojo
Recuperación elástica	99,0%

ventura top catalyst

Catalizador universal para todo tipo de siliconas de condensación.

Ventajas :

- ▶ Gel rojo para una aplicación homogénea de la mezcla.
- ▶ Fácil dispensado.





Puede encontrar más productos de nuestra línea de laboratorio en nuestro folleto de yesos.



Distribuidor:

Madespa

Río Jarama, 120
45007 - Toledo - España (Spain)
www.madespa.com
info@maedspa.com
international@maedspa.com
tel: (+34) 925 241 025